


Contenido Ref. 148960:

- 1 bolsa con auto cierre para la conservación de los dispositivos (A)
- 1 bolsa con cierre adhesivo para la devolución de los dispositivos (B)
- 3 tubos transparentes con líquido en su interior
- 3 cucharillas verdes unidas a un tubo cónico

Instrucciones de uso:



1 Recoger las heces en un recipiente limpio y seco (cuña, orinal o similar, bolsa de plástico, por ejemplo), que no contenga restos de jabones ni desinfectantes. **No usar heces contaminadas con agua, orina o papel higiénico.**

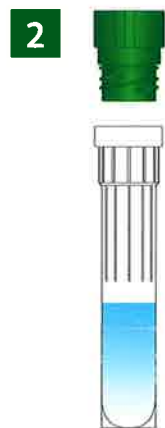

2 Desenroscar el tapón del envase que contiene líquido y colocarlo en una superficie plana para evitar derrames. Desechar el tapón.



3 Utilizar la cucharilla verde que está unida al tubo cónico para coger una muestra del centro de las heces sin que queden restos de muestra en el exterior de la cucharilla (ver ejemplo en las imágenes de abajo).



4



Introducir la **cucharilla con muestra de heces** dentro del envase con líquido (**Nota: no** separar la pala del tubo cónico que lleva en su parte posterior) y cerrar enroscando fuertemente, (**debe quedar como en la figura 4**).

Guardar el envase dentro de la '**bolsa A**', conservar a temperatura ambiente (no en frigorífico) con el extremo cónico hacia arriba hasta que se entregue al laboratorio o centro de salud.

5



Lavarse bien las manos con agua y jabón.

6

Es necesario recoger un total de 3 muestras de heces de días distintos según le indiquen en el centro de salud. Repetir los pasos 1-5 para cada toma de muestras.

7

Una vez recogidas las 3 muestras, introducir la "**bolsa A**" con los 3 envases en la "**bolsa grande (B)**", retirar el papel que cubre la cinta adhesiva y cerrar la bolsa.

¡Importante!



El contenido líquido de los recipientes es tóxico (solución SAF). NO INGERIR.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, beber gran cantidad de leche o agua y llamar al Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20. Si el contenido líquido entra en contacto con piel, ojos y mucosas, lavar con abundante agua y consultar inmediatamente con un servicio médico.

APACOR

Mini Parasep[®] SF
GUÍA PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE HECES